



## Blutentnahme und Probenversand: Schritt für Schritt


1. Holen Sie die schriftliche Einwilligung der Eltern ein und füllen Sie (ggfs. mit den Eltern) den Fragebogen aus. **Die Einverständniserklärung verbleibt in Ihrer Patientenakte.**
2. Die Blutentnahme (siehe auch Anleitung zur kapillaren Blutentnahme)




- ✓ Achten Sie darauf, dass die Hände des Kindes gut erwärmt sind, Knetspiele, warmes Wasser oder Gymnastik können hier hilfreich sein



- ✓ Desinfizieren Sie den Finger des Kindes
- ✓ Drücken Sie den Finger leicht zusammen, setzen Sie die Lanzette nach Entfernen der Schutzkappe fest auf die **Mitte** der Fingerbeere und drücken Sie den Auslöser

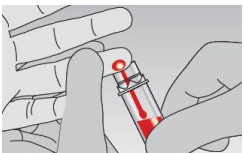

- ✓ Das tropfenweise austretende Blut mit dem Rand der Kapillare bitte aufnehmen
- ✓ Achtung! Vermeiden Sie zu häufiges Wischen, da dies die Blutgerinnung anregen kann

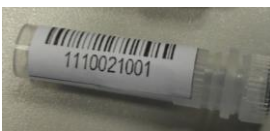

- ✓ Verschließen Sie nach beendeter Blutentnahme das Röhrchen mit dem Deckel, der sich am Gefäßboden befindet. Dieser muss mit einem hörbaren "Click" einrasten
- ✓ Bitte versehen Sie die Microvette© nach der Blutentnahme mit einem Barcodeaufkleber vom Fragebogen. Beachten Sie, dass der Barcode der **Länge nach** aufgeklebt wird

3. **Achten Sie darauf, dass jede Blutentnahme in das Fr1dolin Laborbuch eingetragen wird** (wichtig für spätere Rückfragen). **Verwenden Sie dazu einen Barcodeaufkleber vom Fragebogen.** Nur Sie können im Falle späterer Rückfragen den Patienten anhand der Probennummer identifizieren!



- Den **Fr1dolin**-Aufkleber vom Fragebogen kleben Sie in das U-Heft des Kindes ein.



- Legen Sie die geschlossene Microvette© in die vorgesehene Saugvliestasche. Diese verfügen über vier einzelne Fächer, so dass Sie mindestens 4 Proben mit einer Sendung verschicken können.

- Legen Sie anschließend die Saugvliestasche in den flüssigkeitsdichten Beutel und verschließen Sie diesen mit dem Klebestreifen.



- Der Beutel mit den Proben kann nun zusammen **mit** den Fragebögen in der vorfrankierten Versandtasche verpackt und losgeschickt werden.
- Um Porto und Verpackungsmaterial zu sparen, möchten wir Sie bitten, immer mehrere Proben in einer Sendung zu schicken.
- Versand der Proben** ist über Fahrdienste der Laborgemeinschaften Medizinisches Labor Hannover, Amedes MVZ, Medizinisches Analyse-Zentrum oder Post möglich.
- Sollten Sie die Proben nicht sofort versenden, bitten wir Sie, diese bis zum Versand im Kühlschrank aufzubewahren. Sie können die Proben **maximal 2 Tage** aufbewahren.
- Bitte verwenden Sie ausschließlich das von uns zur Verfügung gestellte Versandmaterial.
- Sie können alle Materialien kostenlos nachbestellen. Nutzen Sie dazu das beigelegte Faxformular.

**>> Vielen Dank für Ihre Unterstützung! <<**

**Ihr Fr1dolin-Team**